

ぎゅーっとしたい気持ちわかります
誰もわかってくれない痛み

つらい痛みは、ゆっくりと強さや深さが変化する刺激でセルフケア



スクランブル通電
Powerful + Combination
マイーブ変調液

心地よい刺激がからだを優しく包みます

家庭用電気治療器 Scramble Wave S
スクランブルウェーブ S

販売名：スクランブルウェーブ S
医療機器認証番号：224AGBZX00109A05
機種名：LFP2MT2

安全
設計

オートパワーオフ機能

電源を切り忘れても5分後に自動的に電源が切れるよう設計されています。


同時
治療

2ヶ所同時治療

両ひざ、肩と腰など2組のパッド導子で同時に治療できます。忙しい方でも時間を有効的に使うことができます。

親切
設計

治療内容は液晶画面に大きな文字で表示されます。

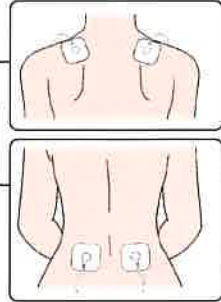

効果


肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮予防およびマッサージ効果

《マッサージ効果とは》

- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ● 疲労回復
- 血行促進 ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のコリをほくす

独自
技術

「スイープ変調波電流により幅広い痛みに対応」

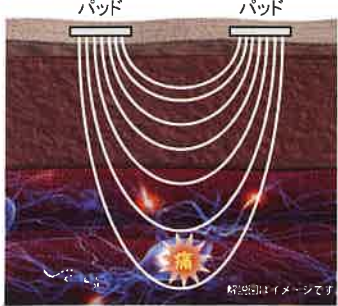

50~1000Hzまで刺激をスイープ(変化)させます

痛みやコリのメカニズムは複雑で、種々の周波数が関係していると言われています。スイープ変調波電流は作用効果を高め、チクチクとした刺激感を軽減させるために周波数4000Hzの波形をAM変調しています。そのコントロールされた電流を50~1000Hzの間で自動可変(スイープ)して、幅広い痛みへの対応とより深い部分への作用を発揮する当社独自のテクノロジーです。


独自
技術

「リフレッシュ感覚スクランブル通電」



4つの電極からの電流が交わり広い範囲で、深く、強く、複雑な刺激をもたらします。

身体の深いところの筋肉を強く、しっかりと刺激するスクランブル通電。麻痺した筋肉に作用し萎縮を予防し肩や腰、背中、足など浅い筋肉から深い関節・筋肉まで全身のリフレッシュに役立ちます。

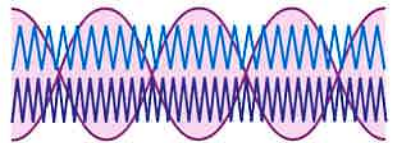

JQA-MD0003

株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超音波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスパーツの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年版認証を取得しています。



安全に関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような機器との併用は誤動作を招く恐れがありますので、使用しないでください。
ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器/人工心臓等の生命維持用医用電気機器/心電計等の装着型医用電気機器/他の治療器や電気製品
- 次のような場合、もしくは身体に異常のある方は、医師に相談の上、指示に従ってください。
心臓に障害のある方/悪性しゅよう(腫瘍)のある方/体温38℃以上の(有熱期)の方/脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方/妊娠初期の不安定期または出産直後の方/糖尿病などによる末梢循環障害による知覚障害のある方/温度感覚喪失が認められる方/適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある方/安静を必要とする方や体調のすぐれない時/その他、身体に異常を感じている時
- 次のような部位への使用は避けてください。症状が悪くなる場合があります。
顔部/陰部/口中/皮膚疾患部/心臓の近く
- 身体の不自由な方や寝たきりの方は、必ず介護される方が付き添って使用してください。
- 使用しても効果が表れない場合や、身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障等が発生した場合は直ちに使用を中止し、お問い合わせまでご連絡ください。

製品仕様

一般的名称：家庭用低周波治療器
販売名：スクランブルウェーブS
機種名：LFP2MT2
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力 5W
出力電流 20mA
タイマー：30分
安全装置：タイマー、ソフトスタート
本体質量：1kg
本体寸法：H:50/L:209/W:262 (mm)

《製造販売元》

株式会社 **マルタカテクノ**

静岡県藤枝市八幡字広通550-1
http://www.marutakatechno.co.jp

お客様相談窓口

0120-484-100
Free Dial 平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

●お取扱店

明治物産株式会社

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛸殻町1-33-4
高田ビル2階
TEL : 03-3666-2511
FAX : 03-3661-4747